

耳かけ型補聴器の装用

補聴器がきちんと装用されていないと落としてしまったり、ピーピー音（ハウリング）が起こったりします。使いはじめのうちはどうも装用できませんがコツをつかんでストレスのない毎日を過ごしましょう。


○電池を入れる

- ①補聴器の電池ボックスを開け、古い電池を取り出します。
- ②新しい電池の保護シール（+極に貼られている）を剥がします。
- ③電池の+極側が上になっていることを確認して補聴器にセットします。
- ④電池ボックスを閉じると電源が入り、イヤモールドを通じて音が聞こえます。

Point

電池が空気を取り込むために保護シールを剥がしてから1分程度おいて使用しましょう。

電池の向きに注意

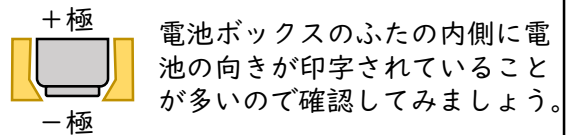

○補聴器のつけ方・外し方

- ①左右の確認をしましょう。右に赤色、左には青色の印があります。
- ②イヤモールドを軽く持ち、矢印の方向へ回しながらゆっくりと耳の中へ押し込んでいきます。
- ③補聴器を耳の後ろに乗せます。
- ④外すときはつけるときと反対の方向に回しながら引き出し、イヤモールドの付け根をつまんで、静かに耳から外してください。
- ⑤電池ボックスを開けて電源を切ってください。

